

STRAUMANN® 金属扫描杆

耐用性和精确度值得信赖。



STRAUMANN®

金属扫描杆

专为增强数字化 工作流程而设计。

Straumann 的新型金属扫描杆采用耐用的钛材质和精心的设计，以提高精确度并支持精确的数字工作流程。改进数字印模，提高患者舒适度，简化工作流程。

1 圆边


CAD 软件中无遮挡。

2 一侧为平面

有助于在 CAD 软件中确定位置。

3 高且轮廓分明的穿龈轮廓

减少对牙龈的压力，优化可视性和扫描效果。

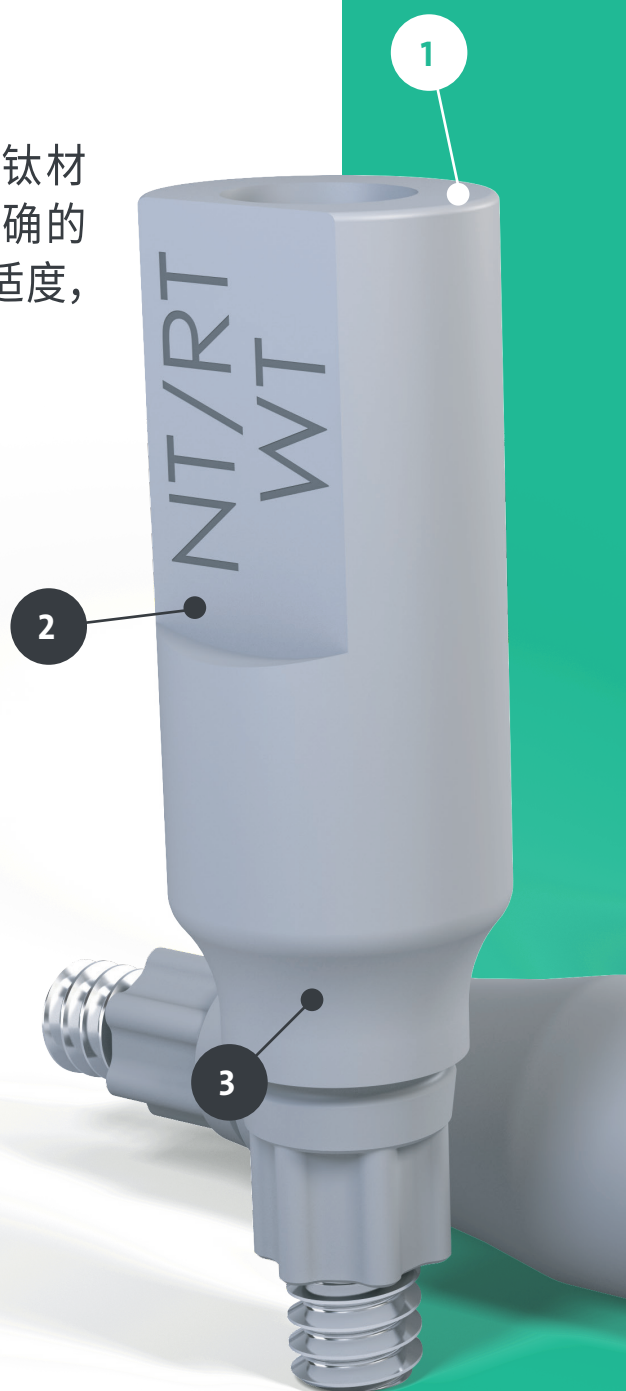



4 窄体部

为邻牙留出更多空间。

5 独特的无反射涂层

无需使用扫描喷雾或粉末。

6 激光标记

易于识别部件。

7 耐用钛材质

不透射线。可重复使用。

STRAUMANN® 金属扫描杆

型号对照表

种植体类型	平台	老式 PEEK 扫描杆	新型金属扫描杆
CrossFit® (十字锁合) - 与 BLT 种植体系统兼容	NC	025.2915	025.0078
	RC	025.4915	025.0079
SRA - 与螺丝固位基台兼容	SRA 3.5	025.0000	025.0080
	SRA 4.6	025.0001	025.0081
synOcta® (八角连接) - 与软组织水平种植体系统兼容	RN	048.168	048.384
	WN	048.169	048.385
TorxFit™ BL - 与 BLC 和 BLX 种植体系统兼容	RB/WB	065.0035	065.0103

下载
CAD/CAM 库



490.880/zh/B/00 06/24

全球总部
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland (瑞士)
电话: +41 (0)61 965 11 11
传真: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

生产企业: MEDENTiKA GmbH 美伦蒂卡有限公司
代理人: 士卓曼 (中国) 投资有限公司
产品名称: 种植体扫描杆
注册证号: 国械备20190664号
沪械广审(文)第280910-09833号
禁忌内容或者注意事项详见说明书

